


機械器具 35 医療用はさみ
一般医療機器 歯科用金冠はさみ JMDN31847000

金冠バサミ

【形状・構造及び原理等】

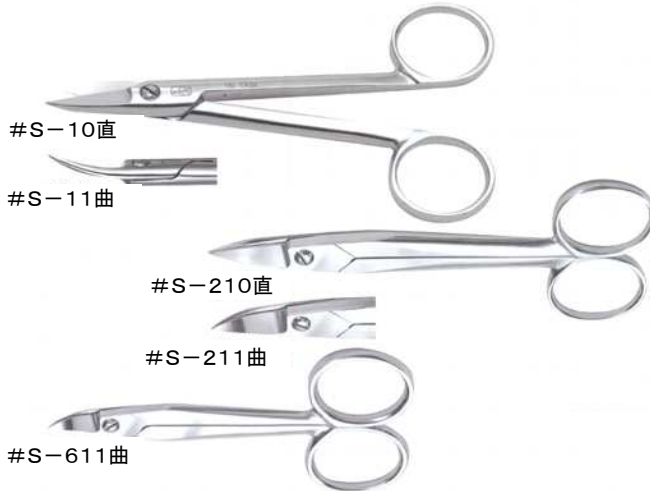

#S-210SS直 #S-211SS曲
#S-510SS直 #S-511SS曲

材質:炭素鋼、ステンレス鋼(#S-210SS直、#S-211SS曲、
#S-510SS直、#S-511SS曲)

【使用目的又は効果】

歯科における金属帯の切断に使用する。

【使用方法等】

リング状のハンドルを手指でしっかり固定し、操作する。直線的に切る時は、直、帯環の辺縁などを曲線的に切るときは、曲を使用する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ① 上記に定めた使用目的以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になり得るので必要以上の応力を加えないこと。
- ② 上記に定めた操作方法、使用方法を守り、それ以外には使用しないこと。
- ③ 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の2次加工(改造)は絶対に行わないこと。
- ④ 長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。
- ⑤ 本品は、使用前に必ず患者の口腔外にて、汚れ、傷、曲がり、破損等、性能、使用目的上支障がないことを確認すること。
- ⑥ 腐食(錆)の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸性水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- ⑦ 腐食(錆)の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシ・ヤスリ等の鋼製工具を使用しないこと。
- ⑧ ステンレス製の#S-210SS直、#S-211SS曲、#S-510SS直、#S-511SS曲は、唾液等の体液の付着する環境で使用する場合以下に注意すること。
 - ・使用前に必ず洗浄を行い、次回からの使用時にも同様に行うこと。
 - ・汚染に注意し、手指、未滅菌の器具などで直接触れないこと。
 - ・使用后、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに防錆洗浄液や精製水に浸漬すること。
 - ・塩素系及びヨウ素系の消毒液は、腐食の原因になるので使用を避けること。使用中に付着したときには直ちに洗い流すこと。
 - ・電気メスをを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器械の表面を損傷するので、併用しないこと。
- ⑨ 炭素鋼製の種類は、唾液等の体液の付着する環境では使用しないこと。

- ⑩ 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、速やかに使用を中止し医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ① 本品は、清潔で湿度が高くない場所にて保管・管理する。
[汚染及び錆を防ぐため]
- ② 洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず乾燥すること。
- ③ 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に滅菌・保管しないこと。また、化学薬品といっしょに収納・保管しないこと。
- ④ 血液、体液、組織及び薬品等が付着したまま保管しないこと。

【使用期間】

- ① 本品を使用中に破損又は汚染したおそれのある場合には、直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 使用前に、汚れ、傷、曲がり、破損等に異常がないか点検をすること。
- ② 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。(使用上の注意参照)

- * ③ ステンレス製の#S-210SS直、#S-211SS曲、#S-510SS直、#S-511SS曲は、以下の保守・点検を守ること。
・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。(使用上の注意参照)
種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがあるため、製剤及び薬剤の添付文書や取扱い説明書記載の用法容量に従い使用すること。
・洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また、汚れが落ちやすいようにバスケットなどに収納すること。
・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- ** アルコールを使用した高圧滅菌、乾熱滅菌、プラズマ滅菌は、劣化の原因となるため使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元・製造元 株式会社 シオダ
電話番号 0287-88-2288