


器 25 医療用鏡

一般医療機器 歯鏡 JMDN31776000

スーパーオーラルミラー

【形状・構造及び原理】

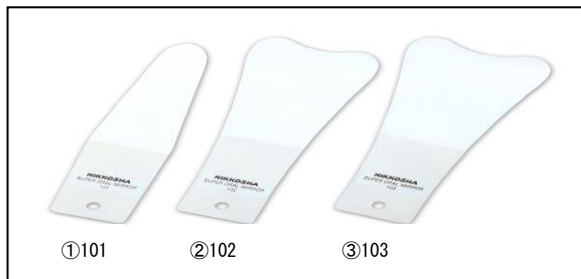

〔原材料〕 作業部: ステンレス(SUS304)を使用した歯鏡。

- 〔種類〕 : ①101(小児・成人側面下顎舌側歯検診及び平行測定)
 ②102(小児・婦人用上下歯検診用 103より小型)
 ③103(一般成人上下顎歯検診用)
 ④ 3枚組セット(101. 102. 103.)

【使用目的又は効果】

〔使用目的〕

口腔内検診及び写真撮影用補助器として用いる歯科用器具で、異なる各3形状から本品を選択して口腔内検診及び口腔内写真撮影等に使用する。

【使用方法等】

- ① 本品の3形状から選択して、口腔内検診及び口腔内写真撮影等の準備を行う。
 本品を口腔内に挿入し、鏡面側を用いて口腔内検診及び写真撮影部位が写る位置で角度等を調節し、口腔内検診または口腔内写真撮影等を行なう。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ① 本品は口腔内検診及び写真撮影補助器具です。口腔内挿入時は口角部損傷に十分注意すること。直接火炎を当てない。
 ② 本品はステンレス製で歯科用消毒は可能ですが、長時間薬液中に浸漬させない事。オートクレーブ・EOGの使用は可能。次の薬液消毒剤は金属腐食を起こす恐れがあります使用しない事。超酸性水・次亜塩素酸Na・塩化ベンザルコニウム・ポビドンヨード・ホルマリン・フェノール・グルコン酸クロルヘキシジン・止血剤・フッ化ジアンミン酸等。

★★ 弊社推奨複合消毒法、

ステップ1. (菌やウイルスの除去と一定のタンパク除去)
 高濃度次亜塩素酸弱酸性水(フィリオ30)にて、スプレークリーニング1分間放置2回洗い流水洗浄。

ステップ2. (十分な洗浄とタンパク除去)
 オキシドール系弱アルカリ洗浄剤(洗浄ルネサンス)にて200倍希釈、10分浸漬後流水洗浄。

ステップ3. 高水準消毒剤のグルタル製剤(化学的殺菌・菌消毒剤)で浸漬処理・流水下洗浄・拭き取り乾燥を十分行う。本品の薬液消毒後は、必ず鏡面の表裏面を温かいお湯下で付着した薬液を十分洗い流してください。なお、水滴による乾燥ムラを防ぐため水切りを十分行ない滅菌袋に入れ滅菌処理を行うこと。

- ③ 本品は、超音波洗浄使用はできません十分注意すること。
 ④ 強アルカリ・強酸性洗剤等の消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあります使用を避けること。また、金属タワシ・クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するため汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
 ⑤ オートクレーブ滅菌器等の高圧蒸気滅菌器は以下に留意する事。
 ●乾燥温度及びチャンバー内温度に注意する。
 ●チャンバー内が高温となる恐れがある場合には予熱乾燥を行う。高温の乾燥は器具の変質又は変色・劣化・破損等を起こす事がある。ヒーター付近に本品を置かない。
 ●長期間の反復オートクレーブ滅菌器等の高圧蒸気滅菌器により本品鏡表面の光沢を失うことが有る。

【使用の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ① 使用前に必ず、洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をすること。**洗浄・滅菌は、[使用方法に関連する使用上の注意] ①② & ステップ1～3 & ③④⑤を参照のこと。**
 ② 使用目的(手術・処置・技工を含む医療行為)以外は使用しないこと。また、破折・曲がり等の原因になりますので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
 ③ 使用後は器具に付着している血液・体液・組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
 ④ 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、速やかに使用を中止し医師の受診を受けること。

【保管方法及び有効期限等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ① 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
 ② 適切な保管・管理をすること。

〔使用期限等〕

本品は使用有効期限等を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事が有るため安全管理上新しい物と適時交換すること。

【保守・点検に係る事項】

使用(滅菌)前使用後に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: 小野島製作所 小野島 謙悟
 住 所: 〒170-0011
 電話 番号: 03-3986-5957
 東京都豊島区池袋本町3-19-12
 製造業者: 小野島製作所 小野島 謙悟
 販売業者: 株式会社 日本歯科工業社
 住 所: 〒110-8530
 東京都台東区上野5-12-8
<http://www.kk-nikkosha.com>
 電話 番号: 03-3836-2191