

ファインデックス
FINDEX

口腔内観察用照明器



品番 dnt00030

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号:13B1X10089001016

- 特殊なオレンジ色フィルターを通して、プラークをチェック
- う蝕/歯周病の早期予防に最適！
- 超高輝度LEDライト使用
- 自動セーフティモード/オーバーヒート防止機能付
- 点灯3パターン→上下4個 / 上2個 / 下2個




ディスプレイライトマスク

ファインデックス

スマートフォンホルダー



※ 歯垢が見えにくい場合、室内環境を暗くして観察してください。

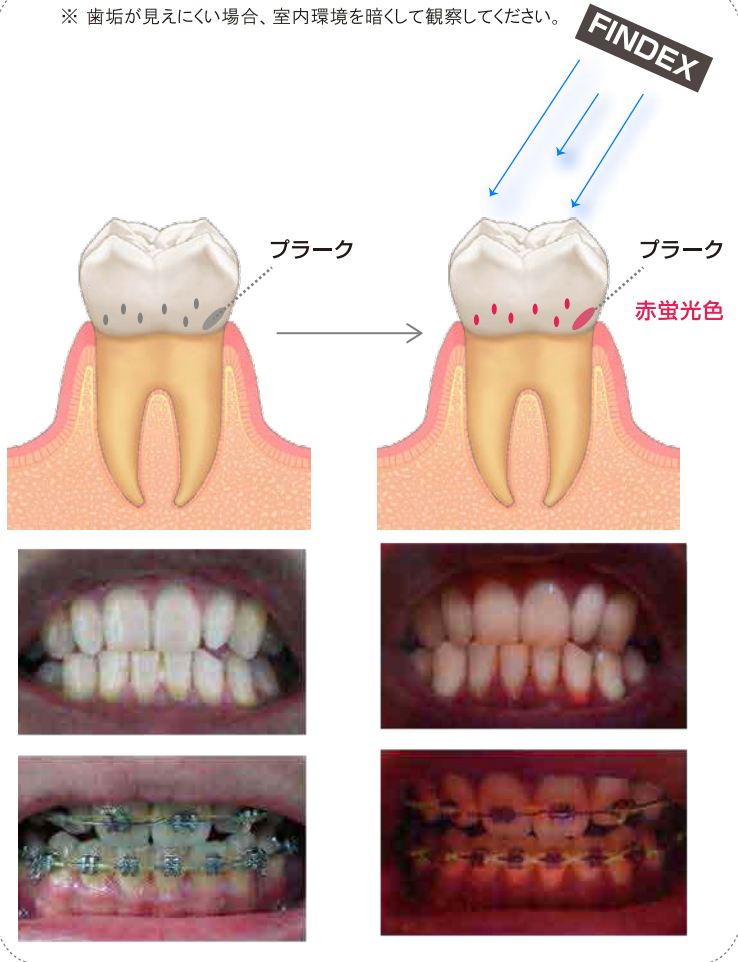

ディスプレイザブル ライトマスク 取付方法



本体・スマートフォンホルダー・ライトマスクを用意する



ディスプレイカバーの折り目を、本体とホルダー間に差し込む



ホルダーにスマートフォンを取り付ける



口の周囲をカバーで覆う



①ファインデックス



(非接触型充電台)

品番 dnt00030

サイズ 156x81x16mm (本体)
158x76x16mm (非接触型充電台)

重量 110g (本体)
80g (非接触型充電台)



②ファインデックス スマートフォンホルダー

品番 dnt00031

サイズ 110x130x37mm

重量 53g



③ファインデックス ディスプレイザブル ライトマスク

品番 dnt00032

数量 10枚入

サイズ 285x95mm



④ファインデックスセット

品番 dnt00033

【セット内容】

①ファインデックス ②ファインデックススマートフォンホルダー
③ファインデックスディスプレイザブルライトマスク (10枚入)

仕様

光源 LEDランプ: 平均寿命約1000時間

波長 390-420 nm、ピーク: 405nm

出力 1200 mW/cm²

リチウムイオン: 3.7 V/1200 mAh

バッテリー 充電時間: 約3時間

使用時間: 上下4点灯で約250回(×20秒)

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号: 13B1X10089001016

販売元



株式会社 ミツバオーソサプライ

<http://www.mitsuba-ortho.com>

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-16-4-2F TEL: 03-3949-0066

FAX: 03-3949-0090

E-MAIL: support@mitsuba-ortho.com