


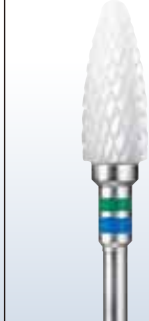
レジン・石膏・マウスガード切削用バー

スマートシェイピングバー

ヘッド部分がジルコニア製の切削バー

レジン・石膏・マウスガードを引っかかりなくスムーズに切削!!

切削面が滑らかなので研磨効率もアップ!!

	ファイン(細)	ミディアム(標準)	コース(粗)
種類			

用途

レジン・石膏・マウスガードの切削

※金属・セラミックス等の硬い材質の切削には適しません。
ヘッド(作業部)のチッピングの恐れがあります。

材質

ジルコニア(ヘッド部分)

回転数	35,000rpm 以下
包装単位	1本/ケース

レジン床



切削後の面が滑らかなため、後の研磨作業が容易です。

人工歯



基底部など鋭角な部分も引っかけることなく切削できます。

石膏



チッピングが少なく、スムーズなトリミング作業ができます。

マウスガード



軟質マウスガード(EVA 材質)もハードタイプ(PET 等プラスチック系)もスムーズな切削が行えます。