


光重合型歯科矯正用粘膜保護材

リラリアワックス

クリスタルクリア色で
耐久性がある粘膜保護材です！

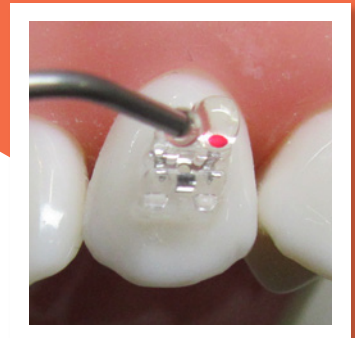

1.5g あたり
ブラケットのフック部
約 120 回適用可能です！



口腔粘膜と
歯列矯正用ブラケットの突起部等が
擦れることにより、
擦過傷等が発生することがあります。

矯正装置の周辺部を
「リラリアワックス」で被覆し光重合後、
次回の診察までの期間中、
被覆した状態を維持します。
口腔粘膜を保護することができますので、
患者様の不快感を軽減します。

● 1.5g × 1 本入

(ディスペンシングチップ (ブラック 19G) 10 本付属)

● ディスペンシングチップ (ブラック 19G) 10 本



リラリアワックスを
矯正用ブラケットの
フック部等の突起部の
周辺部を被覆し、
光照射 20 秒間
(500mW/cm²) します。



透明の保護材のため、
目立たず、日常的な
飲食やブラッシングに
耐久性があります。



ブラックライト下で
蛍光反応します。



探針やピンセット等を
用いて、一塊で簡単に
除去することができます。

リライアンス社 製品

光重合型短期的使用歯科矯正用粘膜保護材

リライアワックス
シリンジ 1.5g 1本入



医療機器届出番号13B1X10394190002
一般医療機器 短期的使用歯科矯正用粘膜保護材

光重合型歯列矯正用バンド接着材

ウルトラバンドLOK ブルー 2本入



医療機器認証番号: 304AGBZX00056000
管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材

1ペーストタイプ光重合型矯正用接着材

GoTo ペースト
シリンジ 4g 1本入



1ペーストタイプ光重合型矯正用接着材

GoTo ペースト
カプセル 0.4g×10個



1液性接着強化型プライマー

アシュアプラス
ボトル 6mL 1本入



1液性接着強化型プライマー

アシュアプラス
ボトル 2mL 1本入



1液性接着強化型プライマー

アシュアプラス
ユニدوز
0.2mL×50個



ポーセレン用コンディショナー

ポーセレンコンディショナー
ボトル 8mL 1本入



1液性セルフエッチングプライマー

ウルトラセップ
ボトル6mL 1本入



1液性セルフエッチングプライマー

ウルトラセップ
ボトル2mL 1本入



医療機器認証番号 305ALBZX00009000 管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
製造業者: Reliance Orthodontic Products, Inc. (リライアンス オーソドンティック プロダクツ社) 製造国: アメリカ合衆国(USA)

本紙に掲載されている情報は2024年6月21日のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

販売元



株式会社ミツバオーソサプライ
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-16-4メゾンカタヤマ2F
TEL. 03-3949-0066 FAX. 03-3949-0090
URL <http://www.mitsuba-ortho.com>

製造販売業者: 株式会社モリムラ
〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351